



FujiCEM 2 від GC

Склоіономерний фіксуючий цемент,
модифікований смолами, створений
з використанням новітньої технології
Force & Fusion - ваша макси-
мальна **впевненість у роботі.**



Зробіть **НОВИЙ** крок з еволюцією стоматологічних матеріалів

Постійне удосконалення - невід'ємна частина існування такої компанії, як GC. Це стосується і серії матеріалів GC FujiCEM: спочатку був розроблений власне GC FujiCEM, що має оригінальну форму випуску **паста-паста**. Потім ми зробили його більш зручним у використанні, створивши версію матеріалу з можливістю **автоматичного замішування (Automix)**.

На сьогодні надійність GC FujiCEM підтвержується десятилітнім досвідом його успішного використання у всьому світі для фіксації більш ніж **150 мільйонів коронок**; наступним етапом розвитку цього матеріалу стала розробка його удосконаленої версії - **GC FujiCEM 2**.




GC FujiCEM 2
Automix



GC FujiCEM
Automix

GC FujiCEM

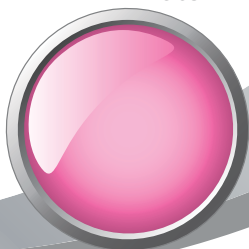

На який матеріал ви готові покластися в роботі?

GC FujiCEM 2 втілює в собі кращі властивості склоіономерів, модифікованих смолами; крім того, при його створенні були покращені наступні параметри:

- Робочі властивості
- Фізичні характеристики

Впевненість у роботі на кожному етапі



Впевненість у роботі з матеріалом є важливим фактором для лікаря-стоматолога; при використанні **GC FujiCEM 2** ви знаєте чого чекати від матеріалу ще до початку роботи.

Замішування вручну

Ви можете зупинити свій вибір на замішуванні вручну і з легкістю змішати пасти А та В.



Автоматичне замішування (Automix)

Опція Automix ідеально підходить для точного та швидшого замішування матеріалу без ризику утворення порожнин та бульбашок, які згодом можуть спричинити виникнення післяопераційної чутливості.

Стійкість до вологи



GC FujiCEM 2 не потребує використання кофердаму або інших засобів контролю вологості операційного поля.

Самоадгезивність



Не потребує використання травильних агентів і адгезивів на підготовчих етапах роботи.

Ідеальна консистенція



Замішана паста утворює кремодібну консистенцію, проте демонструє **необхідну текучість** при надавлюванні в процесі роботи.

Неперевершено тонка плівка



Замішана паста рівномірно розподіляється під час надавлювання в процесі фіксації, створюючи надзвичайно тонку плівку.

Легке видалення надлишків



Через хвилину після початку фіксації цемент переходить в гумоподібний стан, що дозволяє легко й **охайно видалити надлишки матеріалу**.

Довговічні реставрації



Відсутність післяопераційної чутливості, надійна адгезія та тривале фторовиділення, що запобігає розвитку вторинного карієсу.

Що ви отримуєте використовуючи GC FujiCEM 2

Вибираючи цю цілісну систему фіксації - що базується на технології застосування склоіономерів модифікованих смолами - ви вибираєте надійне лікування для ваших пацієнтів. Цей матеріал відзначається 5 ключовими властивостями:

Міцна адгезія

1



Замішаний цемент має оптимальний хімічний баланс, який гарантує максимальний рівень адгезії до тканин зуба, сплавів та композитів. Висока первинна міцність на стискання та на згинання забезпечує найкращу надійність непрямих реставрацій.

Герметизуюча здатність та цілісність в ділянці крайового прилягання

2



Хімічна адгезія до структур зубів зберігає надійність крайового прилягання та мінімізує ризик мікропідтікань і розвиток вторинного карієсу.

Пролонговане фторовиділення

3



Допомагає захистити тканини зубів від розвитку вторинного карієсу. В довготривалому плані матеріал виділяє значно більше іонів фтору в порівнянні з іншими самоадгезивними цементами.

Відсутність післяопераційної чутливості

4



Не викликає подразнення тканин зуба та прилягаючих м'яких тканин, а тому не наражає пацієнтів на ризик розвитку післяопераційної чутливості.

Надзвичайно тонка фіксує плівка

5



Завдяки своїй кремподібній консистенції замішана паста рівномірно розподіляється при надавлюванні в процесі фіксації, створюючи надзвичайно тонку плівку.

Інновації матеріалу

Ознайомтесь детальніше з покращеними характеристиками GC FujiCEM 2.



Покращені робочі властивості

- **Виберіть зручний для вас диспенсер**

Крім металевого диспенсера Paste Pak Dispenser, ви тепер можете використовувати пластмасовий плунжер, який легший на 85%, також придатний до автоклавування та дешевший.

- **Різний колір паст А та В**

Ця властивість матеріалу полегшує візуальний контроль над змішуванням, дозволяючи отримати повністю гомогенну суміш.



Покращені фізичні характеристики



ТЕХНОЛОГІЯ FORCE & FUSION

Створений на основі інноваційної технології Force & Fusion, GC FujiCEM 2 гарантує надійну адгезію коронок та мостів, винагороджуючи вас ще довговічнішими реставраціями*.

МІЦНІСТЬ (FORCE)

Нові високоеластичні мономери з поперечним міжмолекулярним зв'язком

Пластичний мономер з довгим ланцюжком, що входить до складу **GC FujiCEM 2**, забезпечує підвищену міцність матеріалу на згинання, що дозволяє цементу виконувати роль **амортизатора** та краще протидіяти оклюзійним навантаженням.



ЗЧЕПЛЕННЯ (FUSION)

Модифікована обробка поверхні наповнювача

Ця властивість дозволяє збільшити міцність зв'язку між частинками скляного наповнювача та полімерної матриці.

*Дані у вигляді файлу доступні на вимогу.

GC FujiCEM 2 - економічно вигідний матеріал, який підходить для широкого спектру показань, а тому він просто незамінний у вашій роботі. Ідеально підходить для фіксації:

- Металевих та металокерамічних коронок та мостів
- Високоміцних цільнокерамічних (оксид цирконію) коронок та мостів
- Композитних вкладок, накладок, коронок та мостів
- Цільнокерамічних вкладок
- Металевих, керамічних та скловолоконних штифтів



Упаковки

004603	GC FujiCEM 2, Окремо ЕЕР
900630	GC FujiCEM 2, Упаковка Intro з диспенсером Paste Pak Dispenser ЕЕР
900631	GC FujiCEM 2, Упаковка Intro з диспенсером FujiCEM 2 Dispenser ЕЕР
004602	GC FujiCEM 2, Упаковка Automix ЕЕР
900632	GC FujiCEM 2, Упаковка Automix Intro з диспенсером Paste Pak Dispenser ЕЕР
900633	GC FujiCEM 2, Упаковка Automix Intro з диспенсером FujiCEM 2 Dispenser ЕЕР
001573	Диспенсер Paste Pak Dispenser
004647	Диспенсер GC FujiCEM 2 Dispenser
900446	GC FujiCEM 2, Насадки для змішування



GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GC EEO
 Siget 19b
 HR - 10020 Zagreb
 Tel. +385.1.46.78.474
 Fax. +385.1.46.78.473
 info@eoo.gceurope.com
 http://www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
 компанії GC в Україні:
 Група компаній "КРИСТАР"
 04071, м. Київ,
 вул. Межигірська, 50, оф.1
 Тел./Факс: (044) 463.63.37
 (044) 463.62.66
 info@kristar.ua
 http://www.kristar.ua

Спеціалізоване видання,
 призначене для медичних
 закладів, а також лікарів
 та інших професійних
 медичних працівників.

