



initial[™]
IQ ONE SQIN

Система кераміки
для відтворення
кольору та форми

GC

90% усіх зубів виконуються ОСНОВНИМИ ВІДТІНКАМИ...

Уже деякий час можливо виготовляти реставрації жувальних зубів використовуючи один матеріал, такий як дисилікат літію чи циркон, які достатньо естетичні та не потребують трудомісткого процесу нашарування. Монолітна робота набирає популярності.

З **GC Initial IQ ONE SQIN**, системою кераміки для відтворення кольору та форми, у такий же простий спосіб можна отримати естетично привабливі реставрації у фронтальній ділянці зубів. Базуючись на GC Initial "IQ філософії", система складається з різних керамічних матеріалів, що ідеально адаптовані для використання разом, забезпечуючи ефективну та естетичну фінішну обробку монолітної та вестибулярно редуційованої реставрації.





initial[™]
IQ ONE SOIN

Initial IQ Lustre Pastes ONE

Найбільш універсальні керамічні фарби для зовнішнього розфарбування та внутрішньої характеристики субструктур.

- ✓ Консистенція, що готова до використання
- ✓ Природна флюоресценція
- ✓ 3D глибина кольору

Initial IQ SQIN

Завершує фінальну форму ваших реставрацій, забезпечуючи натуральність, текстуру та природний блиск.

- ✓ Легка форма та текстура
- ✓ Ефект самоглазурування
- ✓ 3D структура поверхні

Initial Spectrum Stains

Дрібнодисперсні фарби у вигляді порошку для додаткових індивідуальних ефектів.

- ✓ Безмежні нюанси кольору
- ✓ Можна змішувати з Lustre Pastes ONE чи SQIN



З **GC Initial IQ ONE SQIN**, системою кераміки для відтворення кольору та форми, ви можете швидко та легко досягти високих естетичних результатів у порівнянні з традиційним нашаруванням реставрацій та значно зекономити у часі.



Як це працює? Ви обираєте...

Техніка мікронашарування (монолітна, з вестибулярною мікроредукцією)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE використовується як шар, що фарбує та індивідуалізує, а також слугує ідеальним з'єднувальним шаром перед нанесенням порошків SQIN. При застосуванні техніки мікронашарування SQIN легко наноситься шаром товщиною 0.1 - 0.6 мм на поверхню, що розфарбована Lustre Pastes. Завдяки покращеній суміші часток на основі польового шпату ви досягнете природного 3D-ефекту та отримаєте глибину кольору і реалістичну прозорість.

Змішані з рідиною Form and Texture, порошки SQIN стають надзвичайно компактною та щільною керамічною суспензією. Їх унікальні властивості застосування та моделювання полегшують індивідуальне текстурування поверхні з властивостями автоглазування після випалу кераміки.




...ви отримуєте саме те, що намалювали!

Техніка розфарбування (монолітні)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - доступна у готовій до використання консистенції. Це 3D кераміка для розфарбування на основі польового шпату, що додає вашим монолітним роботам глибину кольору та природну прозорість з надзвичайно натуральним блиском.

Пасту можна наносити товстим шаром, гарантуючи неперевершену вітальність та природний блиск. Зі своєю вираженою флюоресценцією вони точно налаштовані для посилення флюоресценції ваших монолітних реставрацій, особливо при використанні Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

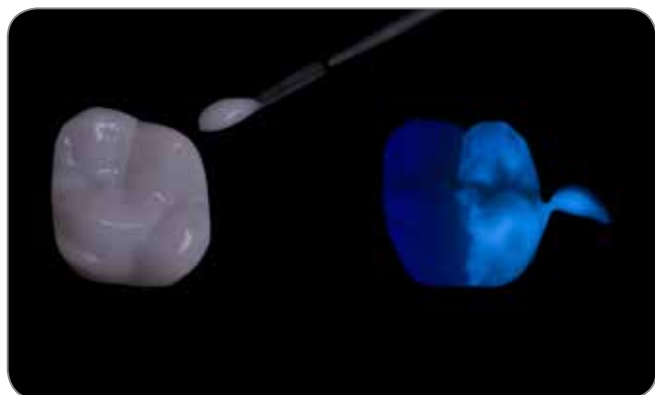

Эстетика



Краса всередині



Природна флюоресценція



Червона та біла естетика



Максимальна естетичність у мікронашаруванні



Простота та економія часу



Створюйте форму та тонку текстуру на вологій стадії.
Без змін після спікання.




Initial IQ Lustre Pastes ONE також виконують функцію
з'єднувального спікання.



Самоглазуючі властивості.
Отримайте чудово заглазурований результат лише після
одного спікання.

ПРАКТИЧНІСТЬ

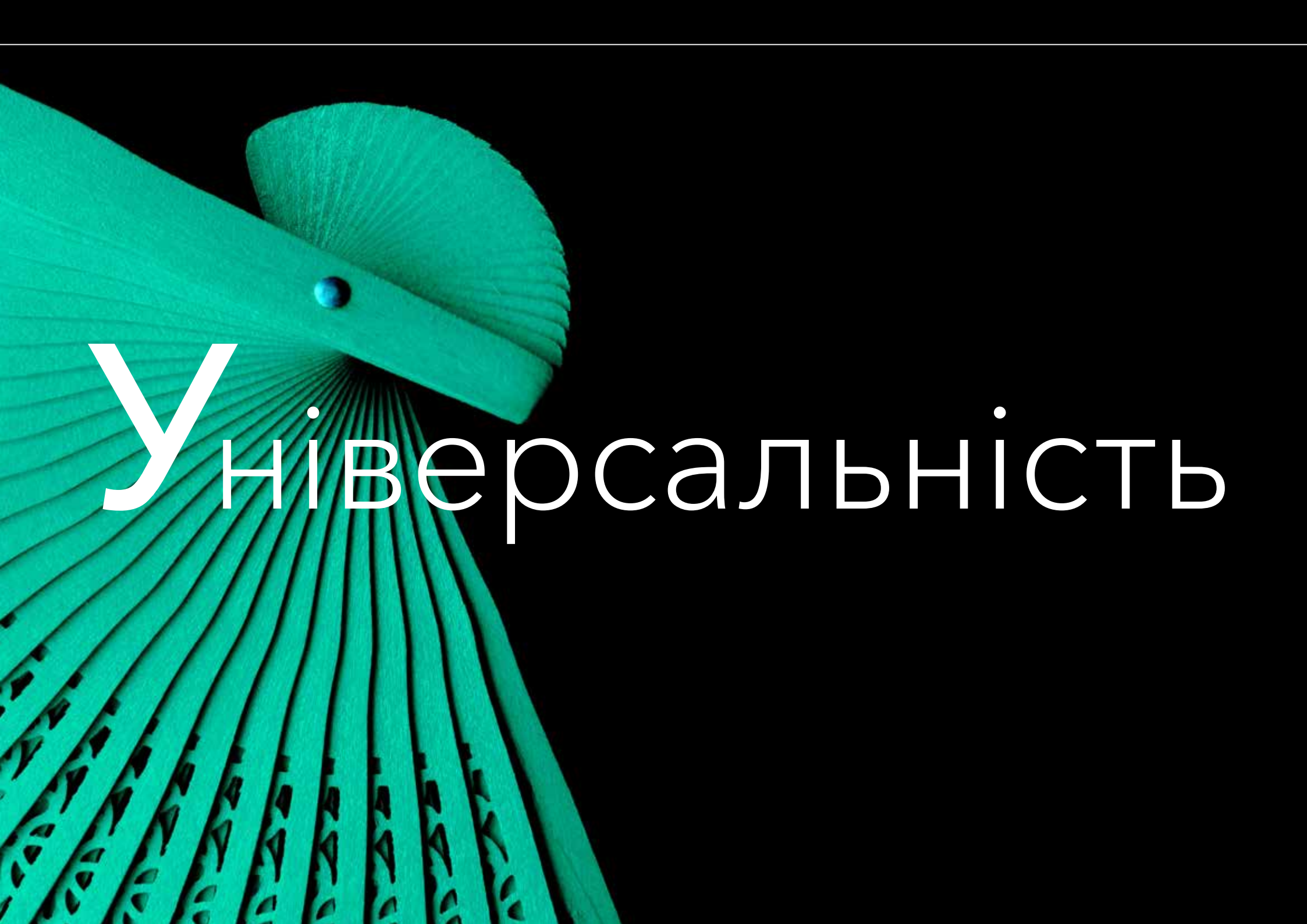

Універсальність

Одна система...



...для усіх ваших цирконієвих та LDS повноанатомічних робіт



...для технік мікронашарування та розфарбовування



...для фронтальних та жувальних реставрацій



Набір **ONE SQIN System Set** для створення високоестетичних реставрацій зі значною економією часу містить набір основних керамічних компонентів.



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Technical Manual
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technical Manual



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x IQ LP ONE Technical Manual



Техніка ONE SQIN для усіх ваших цирконієвих та дисилікат-літєєвих реставрацій

- ✓ Створюйте форму та тонкі деталі текстури на вологій стадії. Відсутність змін після спікання.
- ✓ Властивість автоглазурування. Отримайте чудово заглазурований результат лише після одного спікання.
- ✓ Оптимальний рівень флюоресценції. Зуби виглядають природно за будь-якого освітлення.
- ✓ Максимальна естетичність у мікронашаруванні.



Фото з люб'язного дозволу:

ZTM Michael Brusch (Німеччина): с. 7 (середня та права фотографія); с.9 (середня права та нижня права фотографії); с. 13 (ліва сторона середньої зліва фотографії, верхня права та права сторона нижньої правої фотографії)

MDT Leonardo Cavallo (Італія): с. 7 (ліва фотографія); с. 9 (верхня ліва фотографія)

MDT Patric Freudenthal (Швеція): с. 13 (права сторона фотографії посередині зліва)

ZTM Stefan Roozen (Австрія): с. 6 та с. 10; с. 13 (ліва сторона нижньої правої фотографії)

*initial*TM
IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
<https://europe.gc.dental/uk-UA>

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:

Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental